

The result obtained with whitening with trays was quite satisfactory and did not present any side effect.

El resultado obtenido con el aclaramiento con férulas fue bastante satisfactorio y no presentó cualquier efecto colateral.

FINAL


INITIAL | INICIAL

CASE HIGHLIGHTS | DESTAQUES DEL CASO



It is natural for canines to present greater color saturation than the other teeth. In this case, the canines showed shade A3.

Es natural que los caninos presentaron mayor saturación de color que los demás dientes. En este caso, los caninos presentan coloración A3.

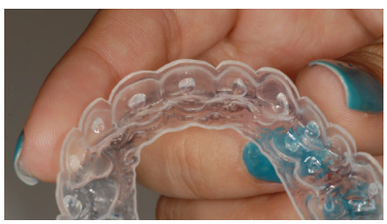

It is important to show the patient the appropriate quantity of gel in the tray (one drop per tooth) because some believe that the quantity is related to the quality, which is not true.

Es importante mostrar al paciente la cantidad adecuada de gel en la férula (una gota por diente) pues algunos creen que la cantidad está relacionada a la calidad, lo que no es verdad.



Trimming the tray around the gum edges prevents excess gel from unnecessarily coming into prolonged contact with the gums.

El recorte de la férula contorneando los márgenes gingivales evita que el exceso del gel quede en contacto prolongado desnecesario con la encía.



At the end of the treatment, the comparison with the initial shade guide is beneficial in showing the patient the level of whitening obtained.

Al terminar el tratamiento, la comparación con la escala de color inicial es interesante para demostrar al paciente el nivel de aclaramiento alcanzado.

EN

Supervised **dental whitening**

AUTHORS: Leticia Pereira Possagno, Yarin Yumi Narazaki, Cristian Higashi and Antonio Sakamoto Junior

Female patient, 22.

COMPLAINT

Yellowish teeth.

INITIAL APPEARANCE

Shade A3 for canines and A2 for the other teeth, according to the VITAPAN® Classical shade guide.

CLINICAL/X-RAY EXAM

Good oral health, healthy teeth and gums. It was concluded that the teeth were vital and naturally darkened.

TREATMENT

Supervised take-home whitening with carbamide peroxide at 16% was performed for 28 days, with weekly reviews.

> "The technique of supervised take-home whitening produced excellent results with comfort to the patient, without any side effects."
>
> *DR. ANTONIO SAKAMOTO JUNIOR*

ES

Aclaramiento bajo supervisión

AUTORES: Leticia Pereira Possagno, Yarin Yumi Narazaki, Cristian Higashi y Antonio Sakamoto Junior

Paciente del género femenino, 22 años.

QUEJA

Dientes amarilleados.

ASPECTO INICIAL

Color A3 para caninos y A2 para los demás dientes, de acuerdo con la guía de colores VITAPAN® Classical.

EXAMEN CLÍNICO/RADIOGRÁFICO

Buena salud bucal, dientes y encía saludables. Se concluyó que los dientes estaban vitales y presentaban oscurecimiento natural.

TRATAMIENTO

Fue realizado el aclaramiento casero supervisado con peróxido de carbamida al 16% durante 28 días, con revisiones semanales.

> "La técnica de aclaramiento casero supervisado dio excelentes resultados de modo cómodo para la paciente, sin cualquier efecto colateral."
>
> *DR. ANTONIO SAKAMOTO JUNIOR*

FGM MATERIALS USED

TAKE-HOME DENTAL BLEACHING GEL (CARBAMIDE PEROXIDE)
Whiteness Perfect 16%

PLATES FOR TRAYS
Whiteness Plates for Custom Dental Trays 1mm

MATERIALES FGM UTILIZADOS

ACLARADOR DENTAL CASERO (PERÓXIDO DE CARBAMIDA)
Whiteness Perfect 16%

PLACAS PARA FÉRULAS
Whiteness Placas para Confección de Férulas 1mm

